

**El único sistema de endoscopia  
capsular con una visión  
panorámica de 360°**




**Vea más.  
Haga más.  
Obtenga más.**

Capso **CAM**  
PLUS<sup>®</sup>


# Vea más.

CapsoCam Plus es el único sistema de endoscopia capsular con una visión panorámica de 360°. Es un sistema de probada eficacia para ver más lesiones<sup>1</sup>, lo que facilita la detección temprana de afecciones a fin de contribuir al tratamiento.

Visión completa de 360 grados de CapsoCam Plus

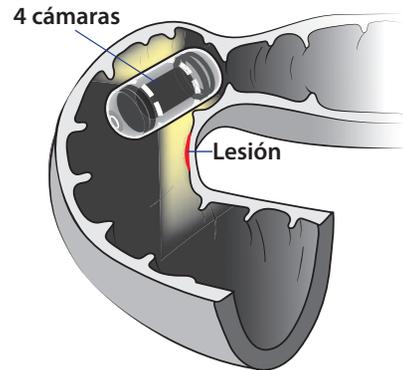

Limitación de visión de "túnel" de la tecnología de cápsula con cámara de visión axial

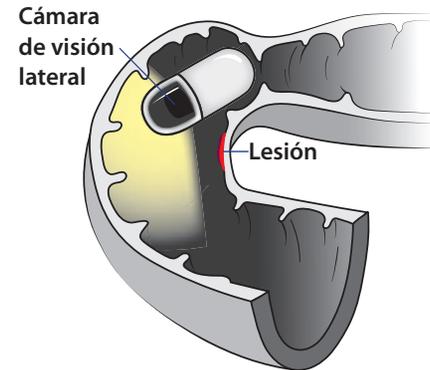

CapsoCam Plus visualizó la ampolla de Vater más del 70%<sup>2</sup> de las veces en comparación con el 10%<sup>3</sup> para las principales cápsulas con cámara de visión axial.

Imagínese cuánto más verá con CapsoCam Plus.

*Si ve más, sabe más.*



CapsoCam Plus es el único sistema de endoscopia capsular que produce una visión continua en 360° del intestino delgado. Las cuatro cámaras del sistema suministran una visión panorámica de la pared de la mucosa, **donde se encuentra la afección.**




**4**  
PASOS

**Cómo funciona**  
*Vaya de la ingestión a la evaluación en cuatro pasos simples.*

# Haga más.

CapsoCam Plus le permite atender a más pacientes, de manera rápida y eficiente. La ausencia de una grabadora de datos, la larga duración de la batería y la alta tasa de aceptación se traducen en una mayor productividad.

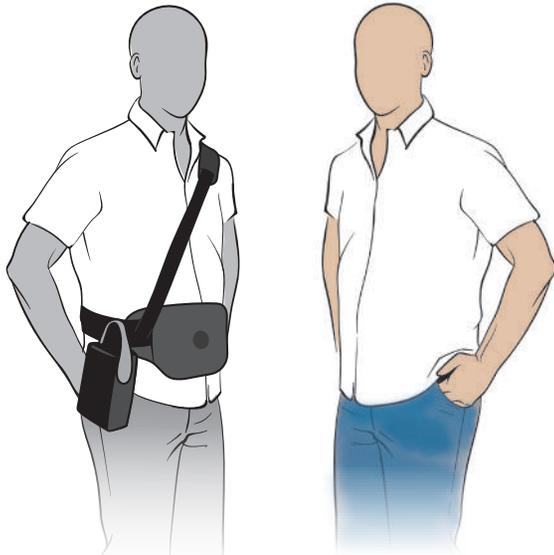

La competencia requiere usar grabadora de datos

CapsoCam Plus no necesita grabadora de datos

**80%**  
DE PREFERENCIA

## Mayor comodidad para los pacientes.

En una encuesta reciente<sup>4</sup>, el 80% de los encuestados manifestaron que preferían el sistema CapsoCam con respecto a los dispositivos más antiguos del tipo "grabadora ponible".

## Más libertad sin grabadoras ni correas.

- Úselo de manera segura en pacientes con marcapasos u otros implantes electrónicos
- Sin riesgo de pérdida de datos en pacientes con un IMC alto
- Sin riesgo de que la radiofrecuencia interfiera en la transmisión de datos




1 El paciente traga la cápsula CapsoCam Plus.



2 El paciente recupera fácilmente la cápsula CapsoCam Plus en aproximadamente de 8 a 48 horas. Se elimina la preocupación de que la cápsula permanezca en el cuerpo del paciente o de que los peligrosos contaminantes de la batería se viertan en el sistema de alcantarillas.




3 El paciente devuelve la cápsula al consultorio del médico.

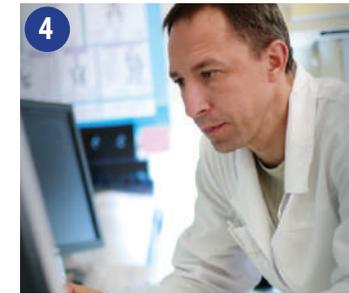

4 Los médicos revisan el estudio realizado con la CapsoCam Plus en una computadora Mac o PC.

## Mayor eficiencia

Reduzca su carga de trabajo y ahorre tiempo para poder hacer más. Las endoscopias capsulares de la competencia requieren alrededor de 20 minutos<sup>5</sup> de preparación y un tiempo de seguimiento por procedimiento, incluida la limpieza y la verificación de las grabadoras de datos. CapsoCam Plus reduce drásticamente la cantidad de tiempo necesaria al eliminar la necesidad de manipular correas o grabadoras. El personal de enfermería no tiene que esperar que los pacientes devuelvan las grabadoras para luego limpiarlas y verificar su funcionamiento. No hay cuellos de botellas en la programación de citas para los pacientes.

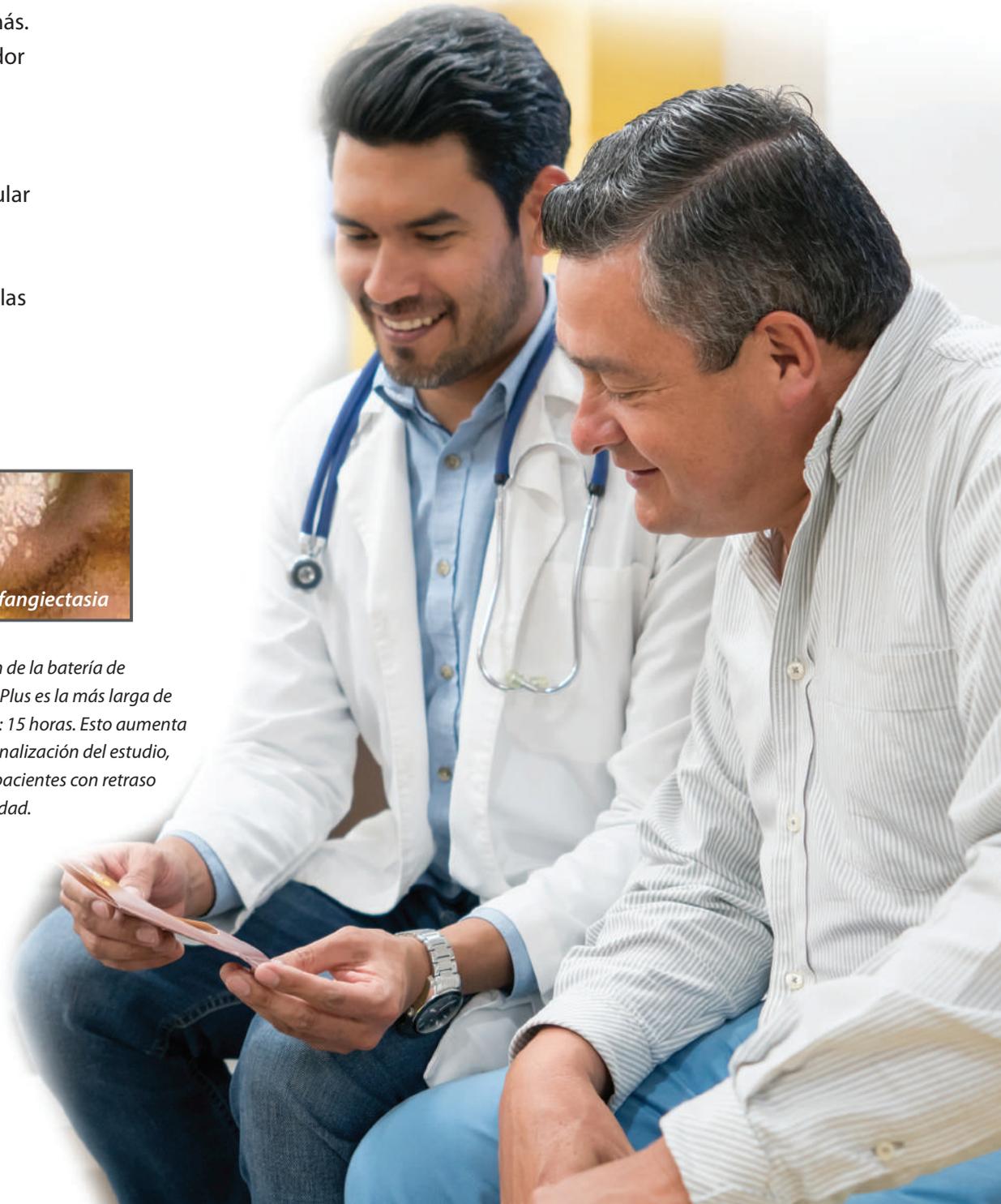


Linfangiectasia

## Obtenga más.

El eficiente sistema CapsoCam Plus requiere una mínima participación del médico y del personal de enfermería, lo que reduce la carga de trabajo.

**15**  
HORAS

La duración de la batería de CapsoCam Plus es la más larga de la industria: 15 horas. Esto aumenta la tasa de finalización del estudio, incluso en pacientes con retraso en la motilidad.

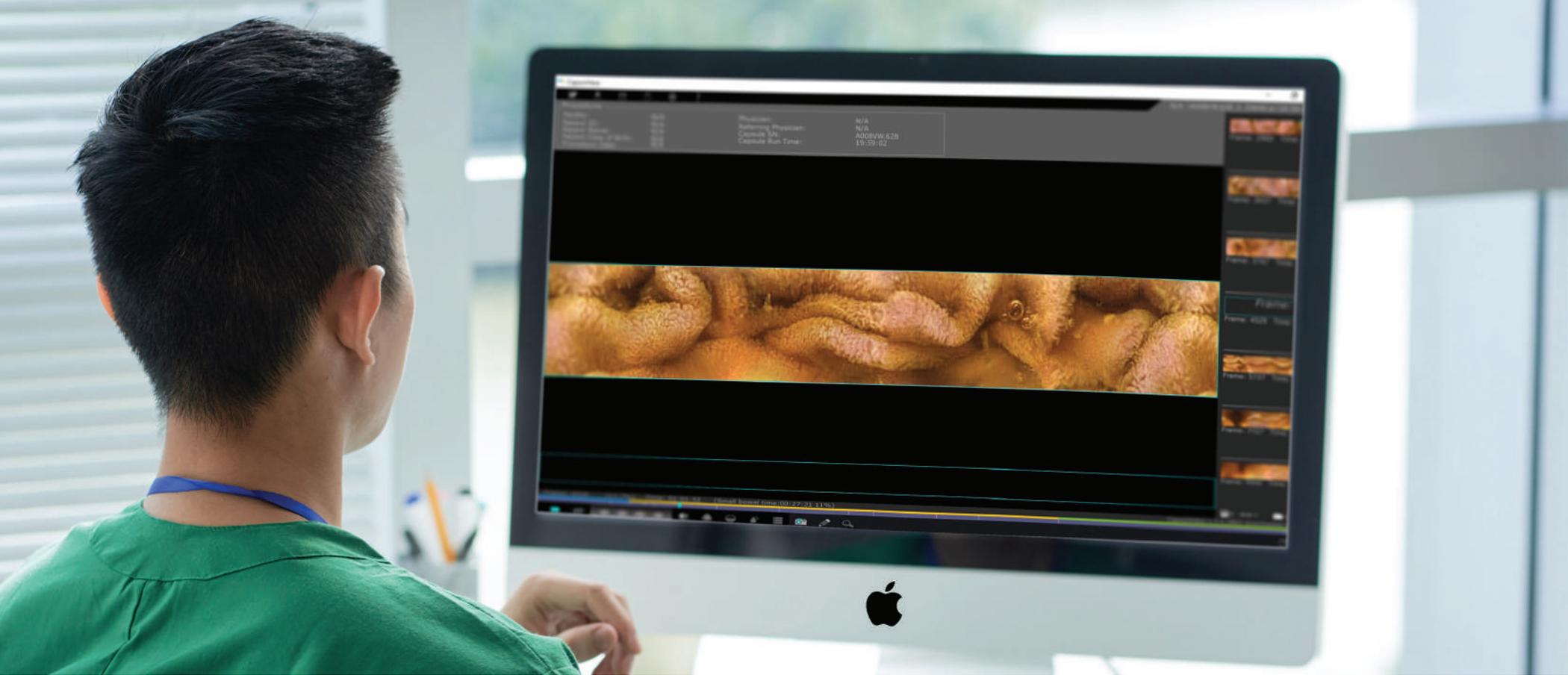

## Visualice fácilmente los resultados de los exámenes con CapsoView®

- La interfaz innovadora y amigable de CapsoView toma imágenes en vivo de alta resolución de 360° por medio de CapsoCam Plus y las presenta en un formato de fácil lectura que hace que el proceso de revisión del estudio sea simple, rápido y eficaz.
- Procese la cápsula en su centro y descargue los datos utilizando el simple dispositivo de descarga CapsoAccess.

## Ahorre tiempo y dinero

- El estudio por imágenes de endoscopia capsular más completo disponible en la actualidad.
- Costo general inferior al del principal competidor.
- El costo de la cápsula incluye todo: software, kit de recuperación, capacitación y asistencia técnica, y dispositivo de descarga de datos.
- Sin costos de activación, gastos de mantenimiento ni cargos de actualización.
- No se requieren contratos a largo plazo.

<sup>1</sup> Lilli L. Zwinger, M.D.\*Christian Bojarski M.D. \*, et al. J Clin Gastroenterology. 2019 ; Volumen 53, Número 3. | <sup>2</sup> Friedrich K, Sieg A, et al. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2013; (28): 1496-1501 |

<sup>3</sup> Clarke et al, Gastrointestinal Endoscopy, Agosto, Volumen 68, Número 2, Páginas 267–272 | <sup>4</sup> 2015 Encuesta interna realizada por el cliente para apoyar su solicitud de aprobación ante la FDA. |

<sup>5</sup> Correspondencia 08./2019, Ian Storch, D. O.

# Veá más. Haga más. Obtenga más.

## Especificaciones

- 4 cámaras orientadas lateralmente
- 16 luces LED de control independiente
- 1.5 GB de almacenamiento de datos en el equipo
- Resolución: 221,184 píxeles
- Hasta 20 imágenes por segundo (5 fps/cámara)
- Batería de 15 horas de duración
- Tamaño de la cápsula: 11x31 mm

El sistema de endoscopia capsular CapsoCam Plus tiene por objeto visualizar la mucosa del intestino delgado en pacientes mayores de 2 años. Puede utilizarse como una herramienta para detectar anomalías en el intestino delgado.

Característica	CapsoCam Plus	Cápsulas con cámara de visión lateral
Campo de visión	Panorámica de 360°	Arco de 145° a 170°
Cámaras	4	1
Imágenes por segundo (fps)	Hasta 20 fps, 5 fps por cámara	2 a 6 fps
Inversión de capital	Ninguna	Sí
Mantenimiento	Ninguno	Sí
Certeza de excreción de la cápsula	Sí	No
Duración de la batería	15 horas	8 a 12 horas
Tiempo de configuración	5 minutos	20 minutos
Tiempo de descarga <sup>5</sup>	CapsoAccess: 20 minutos	30 a 40 minutos
Cantidad de estudios que pueden realizarse por día	Ilimitada	1 por grabadora

Veá más. Para obtener más información o para programar una demostración, comuníquese con su representante local de CapsoCam Plus. [www.capsovision.com](http://www.capsovision.com)

Distribuidor:

Comercializadora Endosistemas Ltda.  
Suecia N° 3243, Ñuñoa, Stgo.  
Fonos: 2 2209 0262 - 2 2785 5826  
[ventas@endosistemas.cl](mailto:ventas@endosistemas.cl)

