

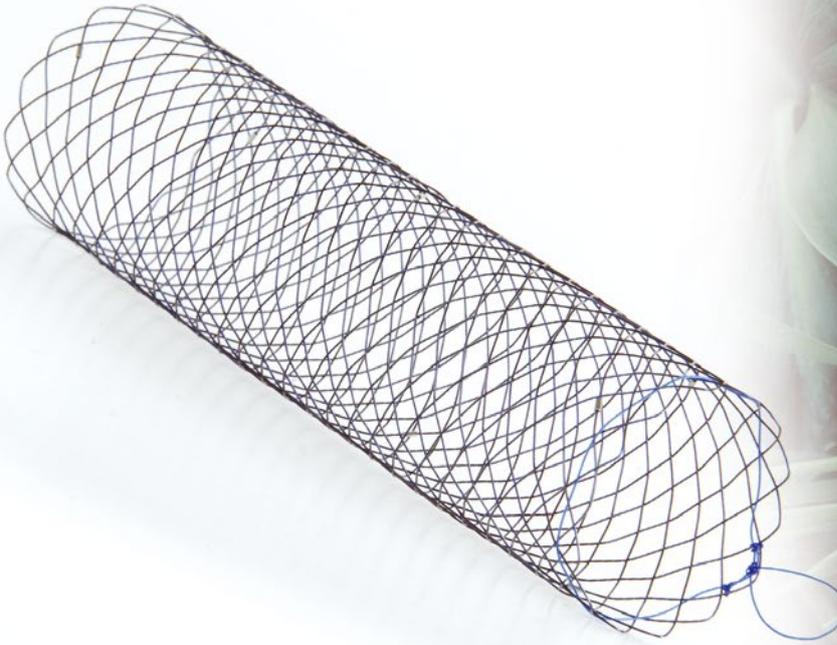


Enterella

SX-ELLA Prótesis Píloroduodenal

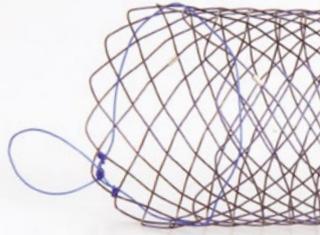

Enterella

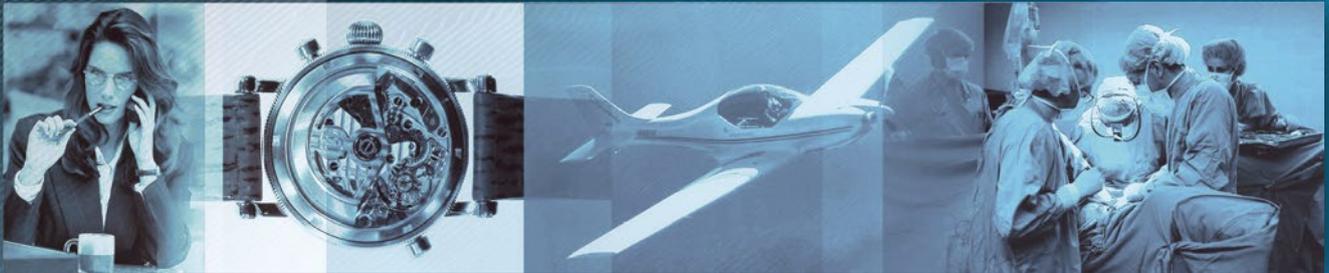

Fácil despliegue

Excelente flexibilidad

Bordes atraumáticos de la prótesis

Alineación perfecta al doblarse



Descripción básica

SX-ELLA Prótesis Píloroduodenal - Enterella

Prótesis autoexpansible de nitinol, precargado en el sistema de implantación PULL para inserción bajo visión fluoroscópica y endoscópica.

Indicaciones

Tratamiento paliativo de la salida gástrica y del duodeno y/u obstrucciones causadas por tumores malignos.

Contraindicaciones

- ☑ Isquemia enteral
- ☑ Perforación intestinal
- ☑ Absceso peritoneal
- ☑ Ascitis severa
- ☑ Coagulopatía severa


Características y beneficios

- ☑ Bordes atraumáticos de la prótesis - prevención eficaz de traumatismos en el sistema gástrico y la pared duodenal.
- ☑ Excelente flexibilidad - perfecta adaptación a las curvas anatómicas en un paciente.
- ☑ Marcadores radiopacos en ambos extremos y en el punto medio de la prótesis - mejor visibilidad; precisión en la colocación de la prótesis.
- ☑ Hilo de plástico para reposicionamiento, ubicado en el extremo proximal de la prótesis - posibilidad de reposicionamiento de la prótesis en los cinco primeros días después de la implantación.
- ☑ El trenzado del sistema de implantación es resistente a la contorsión - óptimo sistema de introducción y despliegue de la prótesis.


Descripción adicional

Sistema de implantación 10.5 F (3.5 mm) disponible en una longitud estándar de 210 cm, permitiendo el paso a través del canal de trabajo de un endoscopio. Punta de oliva del sistema de implantación radiopaca y atraumática. Alambre guía recomendado: 0.035" (0.89 mm).


Sistema de implantación resistente a la contorsión

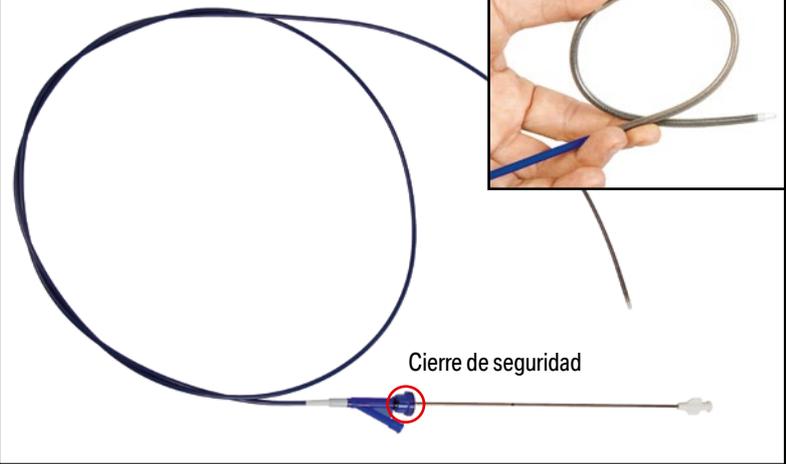


Marcador visual amarillo y el anillo radiopaco

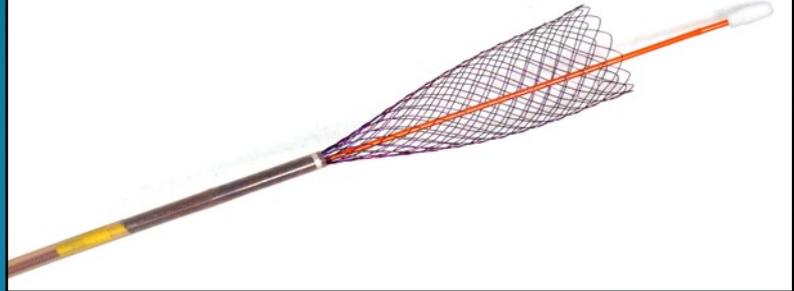


Marcadores radiopacos

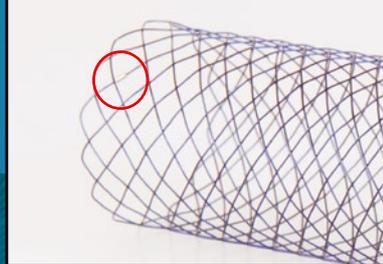


Hilo de plástico para reposicionamiento

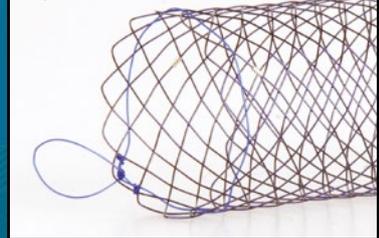

Bordes atraumáticos de la prótesis

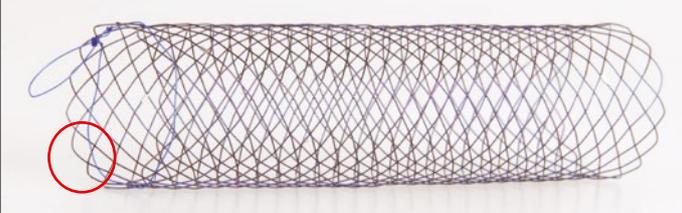

Fácil despliegue

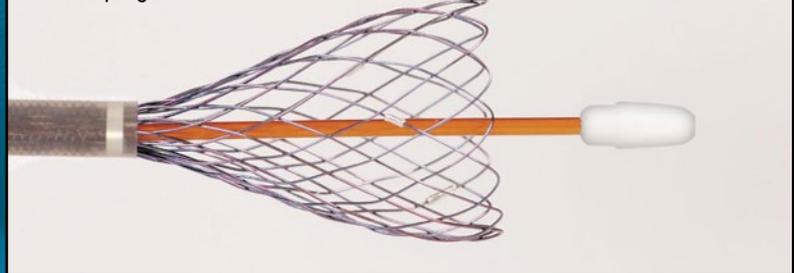

Medidas disponibles

REF No.	Diámetro nominal [mm]	Longitud nominal [mm]
019-04-20-082	20	82
019-04-20-090	20	90
019-04-20-113	20	113
019-04-20-135	20	135
019-04-22-082	22	82
019-04-22-090	22	90
019-04-22-113	22	113
019-04-22-135	22	135
019-04-25-082	25	82
019-04-25-090	25	90
019-04-25-113	25	113
019-04-25-135	25	135

Distribuidor:

Comercializadora Endosistemas Ltda.

Av. Suecia N°3243 Ñuñoa, Santiago

Fono: 22209 0262 - 22785 5826

9a UJ: j YbHlg4 YbXcgjghYa Ug'W

www.endosistemas.cl

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes, 500 06, Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655

E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu