

Flexella Plus

SX-ELLA Prótesis Esofágica



Cubierta de silicona resistente

Prótesis esofágica extraíble

Extremos atraumáticos y antimigración

Excelente flexibilidad



SX-ELLA Prótesis Esofágica – Flexella Plus

La prótesis Flexella Plus está destinada a pacientes de 18 años en adelante y está indicada para el tratamiento paliativo de la disfagia maligna, para sellar fístulas esofagorespiratorias o esofagomediastínicas malignas. El dispositivo puede implantarse temporalmente en pacientes con estenosis esofágicas benignas refractarias.

Prótesis con sistema para inserción bajo visión fluoroscópica y endoscópica. Prótesis autoexpansible de nitinol, completamente recubierta, precargada en el sistema de implantación.

Características y beneficios

- ✓ 2 tipos de sistema de implantación: PULL 16 F / 22 F y PUSH 14 F / 28 F.
- ✓ Sistema de implantación PUSH - estenosis localizadas en la parte superior del esófago.
- ✓ Sistema de implantación PULL (16 F / 22 F)- delgado y flexible; fácil inserción y extracción segura.
- ✓ Lazo de recuperación en aleación de calidad médica disponible en ambos extremos de la prótesis (Flexella Plus PUSH solo en el extremo proximal de la prótesis) - alta durabilidad mecánica y resistencia a los ácidos; estrechamiento centrípeto de la abertura de la prótesis; apropiado para la extracción con el Extractor ELLA.
- ✓ Marcadores radiopacos - inserción precisa de la prótesis.
- ✓ Diseño antimigración - diseño acampanado de los extremos; reducido grado de migración.
- ✓ Bordes atraumáticos - reducción de la irritación de la pared esofágica e hiperplasia.
- ✓ Excelente flexibilidad - alineación perfecta y expansión adecuada de la prótesis a lo largo de las curvas anatómicas.
- ✓ Cubierta de silicona resistente - previene el sobrecrecimiento del tumor y ocluye las fístulas esofagorespiratorias.
- ✓ Válvula antirreflujo opcional - previene el reflujo gastroesofágico y la aspiración.


Descripción adicional

Para prótesis de Ø 20 mm - sistema de implantación PUSH (modelo 06S), 4.7 mm / 9.4 mm (14 F / 28 F), disponible en una longitud estándar de 55 cm. Sistema de implantación PULL 5.2 mm / 7.2 mm (16 F / 22 F), disponible en una longitud estándar de 75 cm. Alambre guía recomendado de 0.035" (0.89 mm) - ultra rígido - longitud mínima de 220 cm.

Flexella Plus PULL




Flexella Plus PUSH

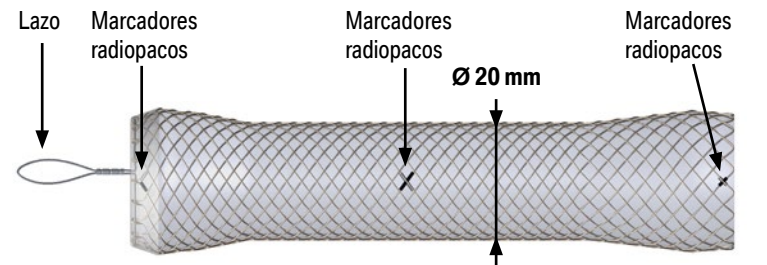

Punta de la oliva compacta para 16 F / 22 F



Sistema de implantación PUSH - 14 F / 28 F

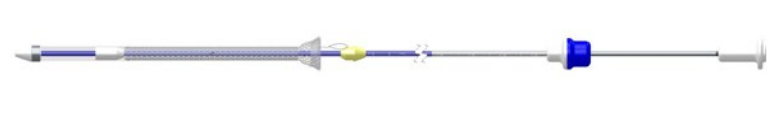

Sistema de implantación PULL - 16 F / 22 F



Medidas disponibles

REF No.	Diámetro de la prótesis [mm] Extremo proximal/cuerpo/ extremo distal	Longitud nominal de la prótesis [mm]	Válvula antirreflujo	Sistema de implantación
019-06S-20-085	25/20/24	85	No	14 F / 28 F - liberación proximal
019-06S-20-110	25/20/24	110	No	14 F / 28 F - liberación proximal
019-07SL-20-085	25/20/25	85	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-110	25/20/25	110	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-135	25/20/25	135	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-150	25/20/25	150	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-085-O	25/20/25	85	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-110-O	25/20/25	110	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-135-O	25/20/25	135	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07SL-20-150-O	25/20/25	150	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-085	25/18/25	85	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-110	25/18/25	110	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-135	25/18/25	135	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-150	25/18/25	150	No	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-085-O	25/18/25	85	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-110-O	25/18/25	110	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-135-O	25/18/25	135	Sí	16 F / 22 F - liberación distal
019-07S-18-150-O	25/18/25	150	Sí	16 F / 22 F - liberación distal



Distribuidor:

Comercializadora Endosistemas Ltda.

Av. Suecia N°3243 Ñuñoa, Santiago

Fono: 22209 0262 - 22785 5826

Email: ventas@endosistemas.cl

www.endosistemas.cl

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 E-mail: info@ellacs.eu
www.ellacs.eu