

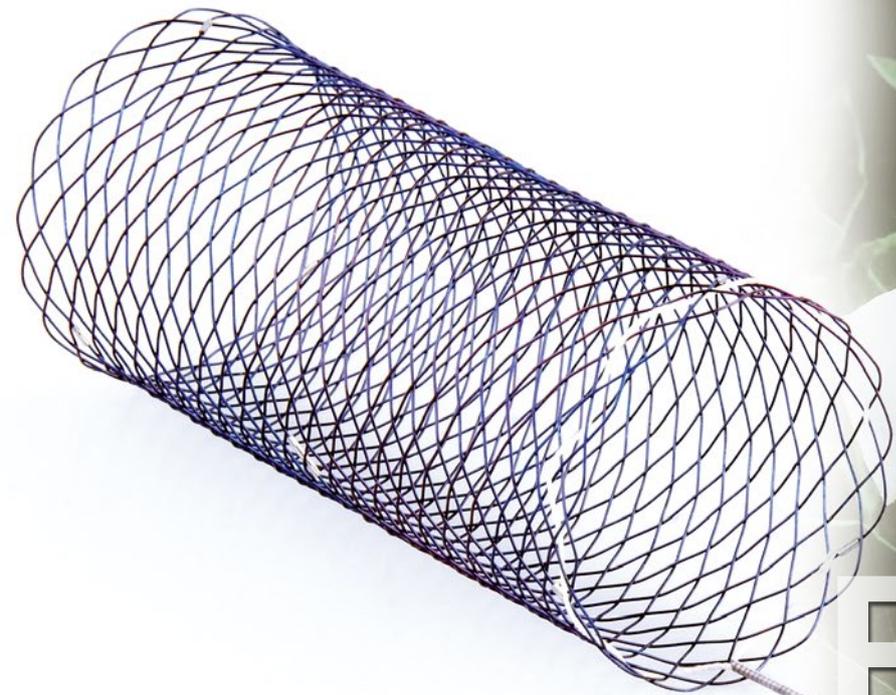


Enterella

SX-ELLA Prótesis Colorrectal

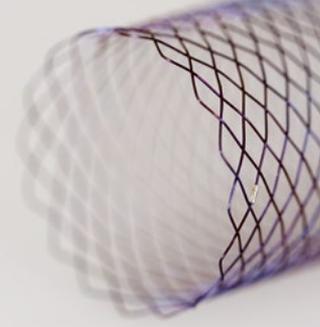

Enterella

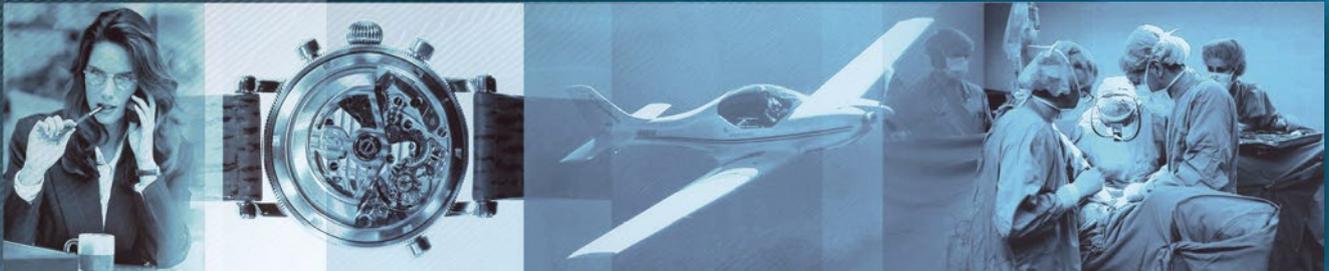


Fácil despliegue

Excelente flexibilidad

Bordes atraumáticos de la prótesis

Alineación perfecta al doblarse

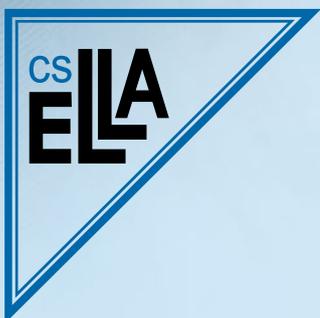

Descripción básica

SX-ELLA Prótesis Colorrectal - Enterella

Prótesis para inserción bajo visión fluoroscópica.

Prótesis autoexpansible de nitinol, precargada en el sistema de implantación PULL.

Indicaciones

- ✓ Enterella Colorrectal está indicada para el tratamiento paliativo de obstrucciones o de estenosis causadas por tumores malignos que afectan el recto, el colon sigmoide o la parte distal del colon descendente. Puede ser utilizada para aliviar temporalmente las obstrucciones, previo a una cirugía electiva.

Contraindicaciones

- ✓ Perforación intestinal
- ✓ Absceso peritoneal
- ✓ Ascitis severa
- ✓ Coagulopatía severa
- ✓ Isquemia enteral
- ✓ Colocación en obstrucción intestinal / estenosis intestinales fuera de las estructuras anatómicas, definidas en la parte de "Indicaciones"


Características y beneficios

- ✓ Bordes atraumáticos - prevención efectiva de lesión a la pared intestinal.
- ✓ Excelente flexibilidad - alineación perfecta a lo largo de las curvas anatómicas.
- ✓ Marcadores radiopacos en ambos extremos y en el punto medio de la prótesis - mejor visibilidad, precisión en la inserción de la prótesis.
- ✓ Hilo plástico para reposicionamiento, ubicado en el extremo aboral de la prótesis - posibilidad de reposicionamiento de la prótesis en los cinco primeros días después de la implantación.


Descripción adicional

Sistema de implantación 15 F (5,08 mm) disponible en una longitud estándar de 95 cm (sistema de implantación de 135 cm está disponible bajo solicitud). Punta de oliva radiopaca y atraumática del sistema de implantación. Alambre guía recomendado de 0.035" (0.89 mm).


Excelente flexibilidad

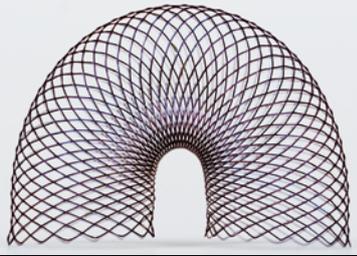

Hilo plástico para reposicionamiento

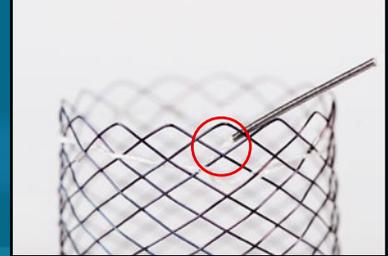

Bordes atraumáticos de la prótesis

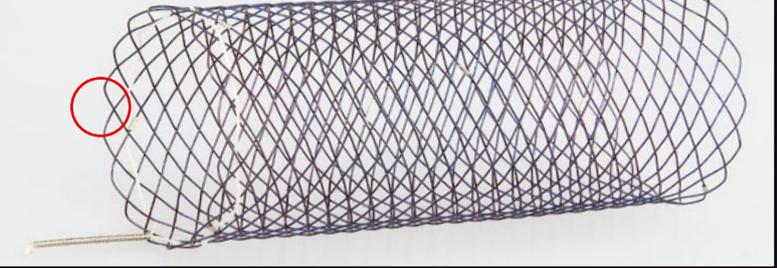


Fácil despliegue



Medidas disponibles

REF No. Prótesis no recubierta	Diámetro nominal [mm]	Longitud nominal [mm]
019-05-22-082	22	82
019-05-22-090	22	90
019-05-22-113	22	113
019-05-22-135	22	135
019-05-25-082	25	82
019-05-25-090	25	90
019-05-25-113	25	113
019-05-25-135	25	135
019-05-30-075	30	75
019-05-30-088	30	88
019-05-30-112	30	112
019-05-30-123	30	123
019-05-30-136	30	136

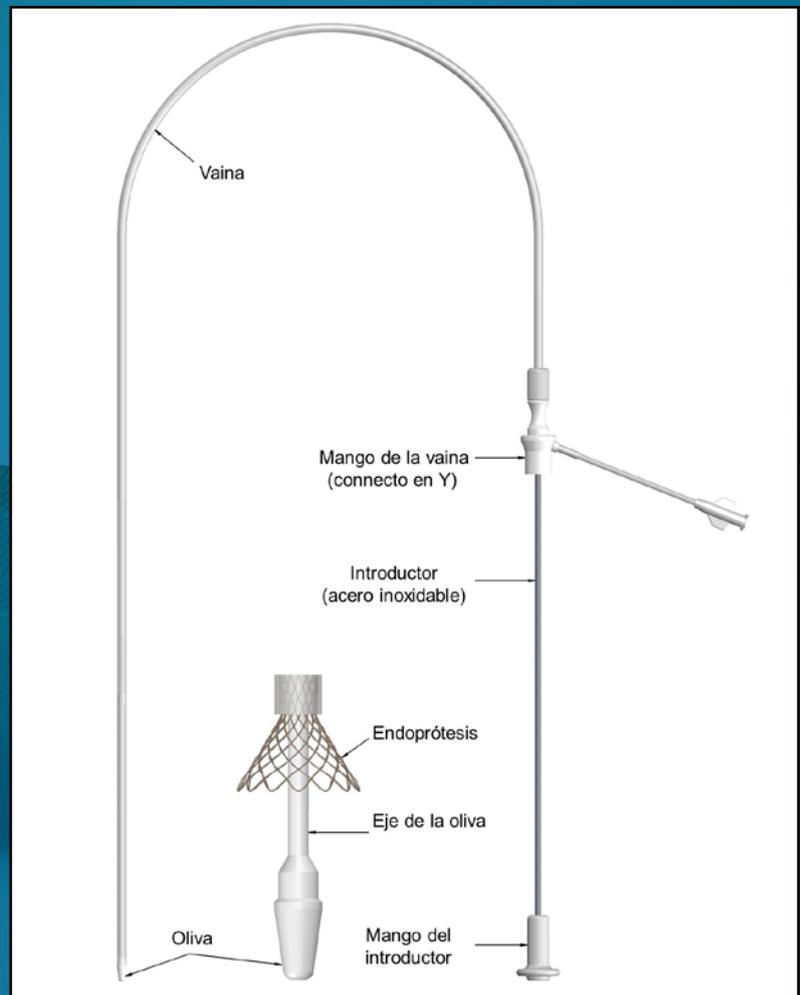

Distribuidor:

Comercializadora Endosistemas Ltda.

Av. Suecia N°3243 Ñuñoa, Santiago

Fono: 22209 0262 - 22785 5826

9 a UJ .j YbHq4 YbXcgjghYa Ug'W

www.endosistemas.cl

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes

500 06 Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655

E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu